

تحضير المجموعة المعدّة للاستخدام مرة واحدة وتحميلها




هذه التعليمات ليست بديلاً عن دليل المشغل. تأكد من قراءة دليل المشغل جيداً قبل تشغيل المضخة. انظر إلى الجهة الأخرى من الورقة للاطلاع على تعليمات تشغيل المضخة.

الخطوة 1

إذا كنت تستخدم مجموعة الشوكات الخاصة بـ Infinity، فقم بإزالة الغطاء الواقي من الموصل وأدخل طرف الموصل في المنفذ المتوافق على حاوية التركيبة المععونة (الصورة A). ثبت الموصل عن طريق إحكام ربط المكونات ذات السن اللولبي معاً.

إذا كنت تستخدم المجموعة سعة 100 مل أو 500 مل أو 1200 مل المعدّة للاستخدام مرة واحدة، فامسك قمع الكيس في وضع عمودي واسكب فيه التركيبة التغذوية. أغلق الغطاء بإحكام وقم بتعليق الكيس (الصورة B).

إذا كنت تستخدم مجموعة توصيل الغطاء اللولبي، فاملأ حاوية/زجاجة تغذية بفتحة مقاس 440 مم وثبتها بالغطاء اللولبي. ضع الزجاج في كيس التعليق وثبتها بعمود تعليق محاليل الحقن الوريدي (الصورة C).

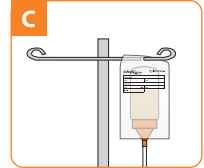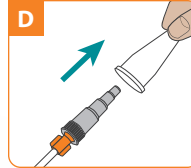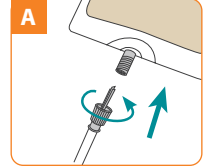





الخطوة 2

أزل الغطاء الواقي من موصل أنبوب التغذية (الصورة D).

الخطوة 3 - التحضير

في حالة تحضير المضخة: لف الأنبوب المصنوع من السليكون حول عجلة المضخة مع تمدده قليلاً. ضع العبّية في مكانها داخل المضخة وأغلق الباب (الصورة E).

قم بتشغيل المضخة بالضغط المطول على مفتاح **ON/OFF** (التشغيل/إيقاف التشغيل) إلى أن تصدر المضخة إشارة صوتية (الصورة F). ثم اضغط مطولاً على المفتاح **PRIME** (التحضير) إلى أن تصل التركيبة إلى موصل أنبوب التغذية (الصورة G).

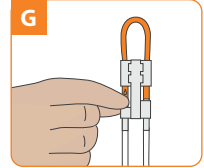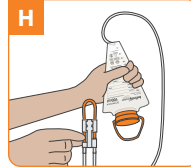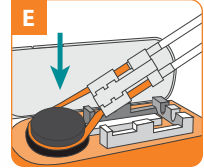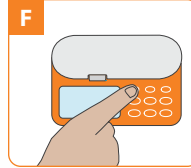

في حالة التحضير اليدوي: اضغط برفق بأطراف أصابعك

على الأنبوب ذو اللون البرتقالي الموجود أسفل الرمز "H" (الصورة G). وأثناء الضغط، عصر الكيس برفق في الوقت نفسه للمساعدة في تدفق السائل. حافظ على هذا الوضع إلى أن تصل التركيبة إلى موصل أنبوب التغذية.

لف الأنبوب المصنوع من السليكون حول عجلة المضخة مع تمدده قليلاً. ضع العبّية في مكانها داخل المضخة (الصورة E). أغلق باب المضخة.

للاستخدام مع حقيبة الظهر: اقلب الكيس وقم بإمالاته للاحتفاظ بالهواء عند منفذ الأنبوب (الصورة H). اضغط برفق بأطراف أصابعك على الأنبوب ذو اللون البرتقالي الموجود أسفل الرمز "H" (الصورة G). وأثناء الضغط، عصر الكيس برفق في الوقت نفسه للمساعدة في تدفق السائل. حافظ على هذا الوضع إلى أن تصل التركيبة إلى موصل أنبوب التغذية.

تحدث مباشرة مع أحد ممثلي Moog عن الأسئلة المتعلقة بالمضخة والتوجيه الخاص باستكشاف الأخطاء وإصلاحها 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.


الدعم الطبي ودعم العملاء 800.970.2337

قم بزيارة infinityfeedingpump.com للحصول على معلومات إضافية



برمجة المضخة وتشغيلها

هذه التعليمات ليست بديلاً عن دليل المشغل. تأكد من قراءة دليل المشغل جيداً قبل تشغيل المضخة. انظر إلى الجهة الأخرى من الورقة للاطلاع على تعليمات تشغيل المضخة.

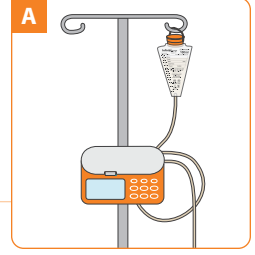

<p>عَلِّق حاوية التغذية بحيث يكون الجزء السفلي من الكيس عند مستوى باب المضخة أو أعلى منه (الصورة A).</p>	<p>تعليق حاوية التغذية</p>
<p>اضغط مُطَوِّلاً على مفتاح ON/OFF (التشغيل/إيقاف التشغيل) لمدة 1.5 ثانية من أجل تشغيل المضخة. ستعرض الشاشة آخر معدل تمّت برمجته.</p>	<p>تشغيل المضخة</p> <p>ON/OFF</p> <p></p>
<p>اضغط على مفتاح RATE/DOSE (المعدل/الجرعة) لعرض "RATE" (المعدل) في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة. استخدم المفاتيح + و - لبرمجة المعدل.</p>	<p>لبرمجة المعدل (مدى سرعة عمل المضخة)</p> <p>RATE/DOSE</p> <p></p> <p></p> <p></p>
<p>اضغط على مفتاح RATE/DOSE (المعدل/الجرعة) لعرض "DOSE" (الجرعة) في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة. استخدم المفاتيح + و - لبرمجة الجرعة.</p>	<p>لبرمجة الجرعة (كمية التغذية)</p> <p>RATE/DOSE</p> <p></p> <p></p> <p></p>
<p>اضغط على مفتاح FOOD TYPE (نوع الغذاء) لعرض نوع الغذاء الذي سيتم توصيله. اضغط على مفتاحي + و - للتغيير بين التركيبة الغذائية والحليب البشري. يتم إطعامه</p>	<p>لضبط نوع الغذاء (أي نوع من الغذاء يتم إطعامه)</p> <p>FOOD TYPE</p> <p></p> <p></p> <p></p>
<p>اضغط على مفتاح RUN/PAUSE (العمل/الإيقاف المؤقت) لبدء تشغيل المضخة.</p>	<p>ابدأ تشغيل المضخة</p> <p>RUN/PAUSE</p> <p></p>
<p>عند اكتمال التغذية، اضغط على مفتاح ON/OFF (التشغيل/إيقاف التشغيل) لمدة 1.5 ثانية لإيقاف تشغيل المضخة.</p>	<p>عند اكتمال التغذية</p> <p>ON/OFF</p> <p></p>
<p>اضغط على مفتاح CLEAR (مسح) لإعادة ضبط القيمة المعروضة. اضغط مطوِّلاً على مفتاح CLEAR (مسح) لمدة 3 ثوانٍ لإعادة ضبط قيم المعدل والجرعة والفواصل الزمنية للتغذية والحجم الذي تم توصيله في الوقت نفسه.</p>	<p>لمسح الإعدادات</p> <p>CLEAR</p> <p></p>
<p>اضغط على مفتاح VOL/TOTAL (الحجم/الإجمالي) مرة واحدة لعرض الحجم الذي تم توصيله للتغذية الحالية. اضغط على المفتاح مرة أخرى لعرض إجمالي الحجم التراكمي الذي تم توصيله منذ آخر مرة تم فيها إعادة ضبط إجمالي الحجم.</p>	<p>عرض الحجم الذي تم توصيله</p> <p>VOL/TOTAL</p> <p></p>

ملاحظة: إذا تم إيقاف تشغيل المضخة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، تتم إعادة تعيين عداد الحجم الذي تم توصيله إلى 0 وتتم إعادة تعيين نوع الغذاء إلى التركيبة الغذائية. يجب تأكيد المعدل والجرعة ونوع الغذاء قبل إعادة تشغيل المضخة بتغذية جديدة.

ملاحظة: إن أي تغيير في إعدادات المضخة (باستثناء نوع الغذاء) أثناء دورة التغذية سيؤدي إلى بدء المضخة بعملية تغذية جديدة؛ ولن تستأنف من حيث توقفت. يجب تأكيد المعدل والجرعة ونوع الغذاء من خلال عرض كل متغير قبل إعادة تشغيل المضخة.