


## Pag-prime at Pag-load ng Disposable Set

**Ang mga instruksyong ito ay hindi pampalit sa manwal ng operator.** Siguraduhin na babasahin nang lubusan ang manwal ng operator bago paganahin ang pump. Tingnan ang kabilang parte para sa mga instruksyon tungkol sa pagpapagana ng pump.


### HAKBANG 1

- Kung ginagamit mo ang Infinity Spike set, alisin ang protective cover mula sa connector at ipasok ang dulo ng connector sa katugmang port na nasa lalagyan ng enteral formula (larawan A). Patibayin ang connector sa pamamagitan nang mahigpit na pag-screw ng mga komponenteng threaded nang magkakasama.
- Kung ginagamit mo ang 500 mL o ang 1200 mL na disposable set, hawakan ang imbudo ng bag nang paitaas at ibuhos ang feeding formula. Isara nang mahigpit ang cap at isabit ang bag (larawan B).

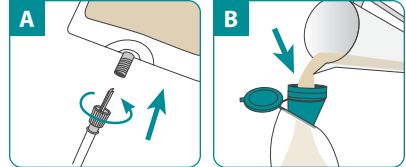

### HAKBANG 2


Alisin ang protective cover mula sa feeding tube connector (larawan C).

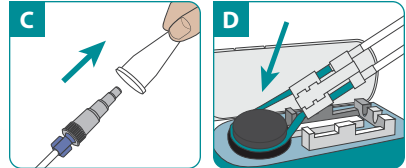

### HAKBANG 3 - PRIMING


**KUNG PINA-PRIME ANG PUMP:** Ipulupot ang silicone na tubo sa palibot ng pump wheel nang maingat na binabanat. Ilagay ang cassette sa loob ng pump at isara ang pinto (larawan D).

Buksan ang pump sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa key na **ON/OFF** hanggang mag-beep ang pump (larawan E). Pagkatapos, pindutin nang matagal ang key na **PRIME** hanggang umabot ang formula sa feeding tube connector (larawan F).

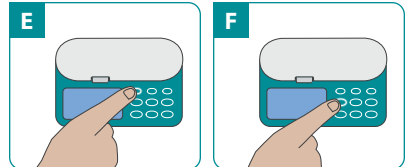

**KUNG MANO-MANO ANG ANG PAG-PRIME:** Dahan-dahang kurutin ang kulay teal na tubo sa ibaba ng simbolong "⊙" (larawan G).

Habang kinukurot, isabay ang dahan-dahang pagpisisil sa bag para matulungan ang daloy ng fluid. Manatili sa posisyong ito hanggang umabot ang formula sa feeding tube connector.

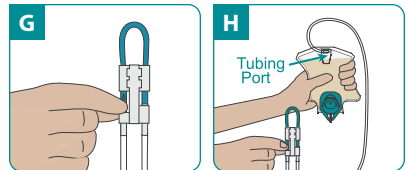

Ipulupot ang silicone na tubo sa palibot ng pump wheel nang maingat na binabanat. Ilagay ang cassette sa loob ng pump (larawan D). Isara ang pinto ng pump.

**Para sa paggamit ng backpack:** Baligtarin ang bag at ikiling ang bag para mapanatili ang hangin sa port ng tubo (larawan H). Dahan-dahang kurutin ang kulay teal na tubo sa ibaba ng simbolong "⊙" (larawan G). Habang kinukurot, isabay ang dahan-dahang pagpisisil sa bag para matulungan ang daloy ng fluid. Manatili sa posisyong ito hanggang umabot ang formula sa feeding tube connector.




Makipag-usap nang live sa isang Moog Clinical Representative para sa mga tanong tungkol sa pump at gabay sa pag-troubleshoot 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo.









Clinical & Customer Support **800.970.2337**

Bisitahin ang [infinityfeedingpump.com](http://infinityfeedingpump.com) para sa karagdagang impormasyon
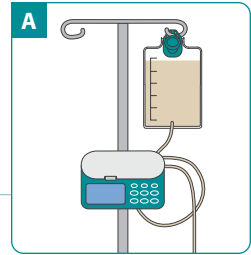
# Pagpoprograma at Pagpapaandar ng Pump

**Ang mga instruksyon na ito ay hindi pampalit sa manwal ng operator.** Siguraduhin na basahin nang lubusan ang manwal ng operator bago paganahin ang pump. Tingnan ang kabilang parte para sa mga instruksyon sa pagpapagana ng pump.

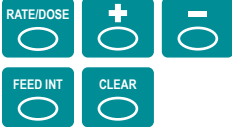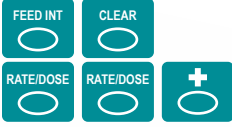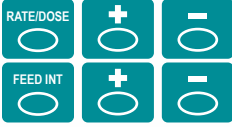

<p><b>Isabit ang feeding container</b></p>	<p>Isabit ang feeding container para ang ilalim ng bag ay kapantay ng o mas mataas kaysa sa lebel ng pintuan ng pump (larawan A).</p>	
<p><b>Buksan ang pump</b></p>	<p>Pindutin nang matagal ang key na <b>ON/ OFF</b> na key sa loob nang 1.5 segundo para buksan ang pump. Ipapakita ng display ang huling na-iprogramang bilis.</p>	
<p><b>Para iprograma ang bilis</b> (gaano kabilis tumatakbo ang iyong pump)</p>	<p>Pindutin ang key na <b>RATE/DOSE</b> para lumabas ang “RATE” sa ibabang kaliwang kanto ng screen. Gamitin ang mga key na + at - para iprograma ang bilis.</p>	
<p><b>Para ma-iprograma ang dosis</b> (gaano karami ang ipapakain)</p>	<p>Pindutin ang key na <b>RATE/DOSE</b> para lumabas ang “DOSE” sa ibabang kaliwang kanto ng screen. Gamitin ang mga key na + at - para iprograma ang dosis. Tandaan: Kung ang “FEED INTERVAL” ay nasa display, burahin ang agwat ng pagpapakain sa pamamagitan ng pagpindot sa key na <b>FEED INT</b>, at pagkatapos ay pindutin ang key na <b>CLEAR</b>.</p>	
<p><b>Para mag-programa ng isang nagtutuloy-tuloy na na pagpapakain</b> (setting lang ng bilis)</p>	<p>Kung ang “FEED INTERVAL” ay nasa display, burahin ang agwat ng pagpapakain sa pamamagitan ng pagpindot sa key na <b>FEED INT</b>, at pagkatapos ay pindutin ang key na <b>CLEAR</b>. Pindutin ang key na <b>RATE/DOSE</b> nang dalawang beses para lumabas ang “DOSE” sa ibabang kaliwang kanto ng screen, at pindutin nang matagal ang key na + hanggang sa makita ang INF.</p>	
<p><b>Para mag-programa ng may-agwat na pagpapakain</b> (o paulit-ulit na pagpapakain)</p>	<p>Pindutin ang key na <b>RATE/DOSE</b> para lumabas ang “DOSE” sa ibabang kaliwang kanto ng screen. Gamitin ang mga key na + at - na para iprograma ang dosis. Pindutin ang <b>FEED INT</b> key para lumabas ang “FEED INTERVAL” sa ibabang kaliwang kanto ng screen. Iprograma ang gustong bilang ng mga oras at mga minuto gamit ang mga key na + at -.</p>	
<p><b>Simulan ang pump</b></p>	<p>Pindutin ang key na <b>RUN/PAUSE</b> na key para simulan ang pump.</p>	
<p><b>Kapag kumpleto na ang pagpapakain</b></p>	<p>Kapag kumpleto na ang pagpapakain, pindutin ang key na <b>ON/OFF</b> nang 1.5 segundo para patayin ang pump.</p>	
<p><b>Para burahin ang settings</b></p>	<p>Pindutin ang key na <b>CLEAR</b> para makapag-reset ng naka-display na bilang. Pindutin nang matagal ang key na <b>CLEAR</b> sa loob nang 3 segundo para mai-reset ang bilis, dosis, agwat ng pagpapakain, at dami na naihatid na bilang sa magkaparehong oras.</p>	
<p><b>Tingnan ang dami ng naihatid</b></p>	<p>Pindutin ang key <b>VOL/TOTAL</b> nang isang beses para lumabas ang naihatid na dami para sa kasalukuyang pagpapakain. Pindutin uli ang key para lumabas ang kabuuang naipong dami ng naihatid simula nang huling pag-reset.</p>	